


產品名稱

移位滑動布組

產品照片

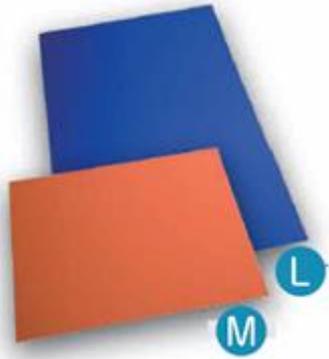

內容物

型號:CS-SM-M

無縫線一體成型，兩種尺寸移位滑動布組

使用目的


一、移乘輪椅、座位調整；床鋪上體位翻身移位。

二、功能設計：

材質：採用降落傘材質，牢固且滑動級數倍增。

多用途使用：移乘輪椅、座位調整；床鋪上體位翻身移位。


使用步驟(請將步驟分解說明，如第一步...)

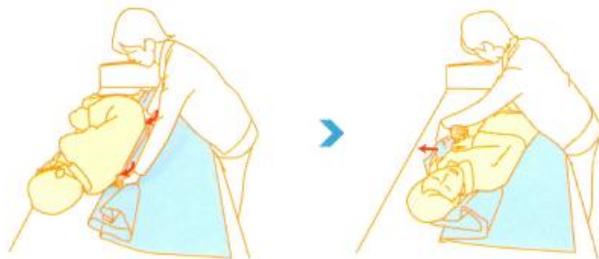

『床上移位』

第一步:讓案主側躺；將移位滑動布捲起塞入案主下方。


第二步:讓案主躺平即可做左右側移位動作。

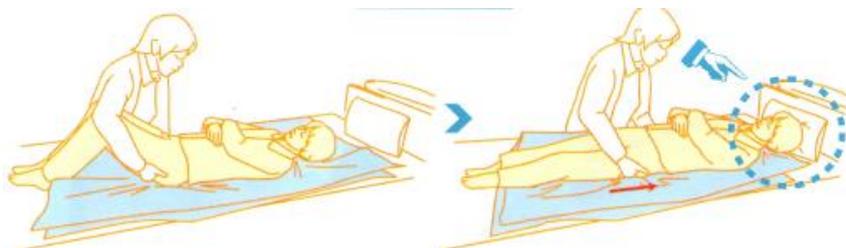

『向上移位』

第一步:將案主雙腳屈膝，雙手扶住大腿外側。


第二步:將案主往上輕推，注意案主頭部需墊枕頭防止撞傷意外。

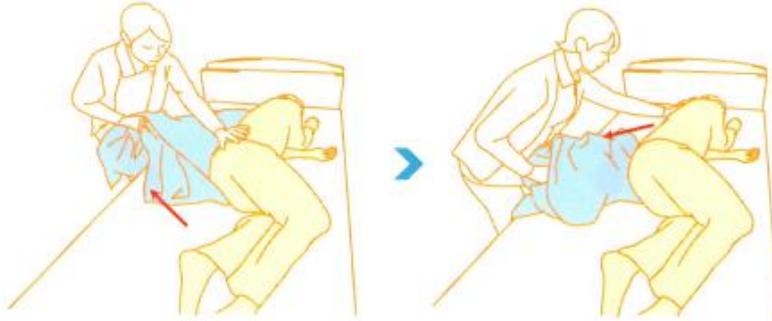

『抽出移位滑動布』

第一步:將案主翻至側身，一隻手支撐案主、一隻手將腳下移位滑動布往反方向抽出。

第二步:一隻手支撐案主、一隻手將頭部移位滑動布往反方向抽出。

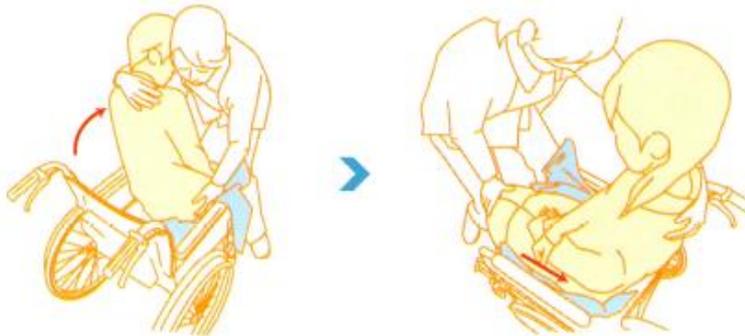

『坐姿矯正』

第一步:將案主上半身向前傾斜。

第二步:滑動座椅和案主，將身體向後推並坐下。

注意事項

1. 遠離乾燥機和火爐等高溫物品。
2. 照顧者在使用上務必注意案主安全。